



- JadaCare hoogte verstel rails / Rail-in systemen om hulpmiddelen in hoogte te stellen
- snel en eenvoudig aan te brengen
- handmatig of elektrisch verstelbaar
- eenvoudig te reinigen
- verkrijgbaar voor toiletbeugels | douchezittingen | wastafels

Specificaties

540040(C) Rail-in systeem toiletbeugels

- leverbaar in RVS gepolijst en wit - 540040(C)
- geschikt voor alle JadaCare toiletbeugels
- beugels zijn 15 cm hoogte instelbaar
- toiletbeugel is in de rail opklapbaar en in op staande stand beremd
- gebruikersgewicht tot 200 kg per beugel



Toepassing

- indien de toiletbeugel eenvoudig, zonder boren, hoogte instelbaar moet zijn. Een indicatiewijziging is of een andere gebruiker kan tot een andere hoogte leiden.



Optioneel

- indien geen toiletbeugel is aangebracht kan de rail worden afgedekt met een afdekplaat welke in de rail wordt geschoven
- de rail kan ook worden afgedekt met een sierkap. Deze wordt over de rail geplaatst en is leverbaar in RVS gepolijst of wit en is leverbaar in iedere gewenste RAL kleur.
- indien er in plaats van de standaard mee geleverde inbusbout een spangreep wordt aangebracht is de beugel eenvoudig zonder gereedschap hoogte instelbaar
- ook wanneer een steunpoot is aangebracht, kan de toiletbeugel in een rail worden aangebracht en blijft deze opklapbaar



Specificaties

5 20 040(C) Rail-in systeem douchezittingen


- leverbaar in RVS gepolijst en wit
- geschikt voor alle JadaCare douchezittingen
- douchezittingen zijn 23 cm hoogte instelbaar
- douchezitting is in de rail opklapbaar
- gebruikersgewicht tot 150 kg

Toepassing

- douchezitting is eenvoudig, zonder boren, hoogte instelbaar
- een indicatiewijziging is of andere gebruiker kan tot een andere zithoogte leiden

Optioneel

- indien geen douchezitting wordt aangebracht kunnen de rails worden afgedekt met afdekplaten welke in de rails worden geschoven
- de rails kunnen ook worden afgedekt met sierkappen. Deze worden over de rails geplaatst en zijn leverbaar in RVS gepolijst of wit en in iedere gewenste RAL kleur
- een opklapbare steunpoot kan worden aangebracht onder een douchezitting welke in het rail-in systeem is aangebracht

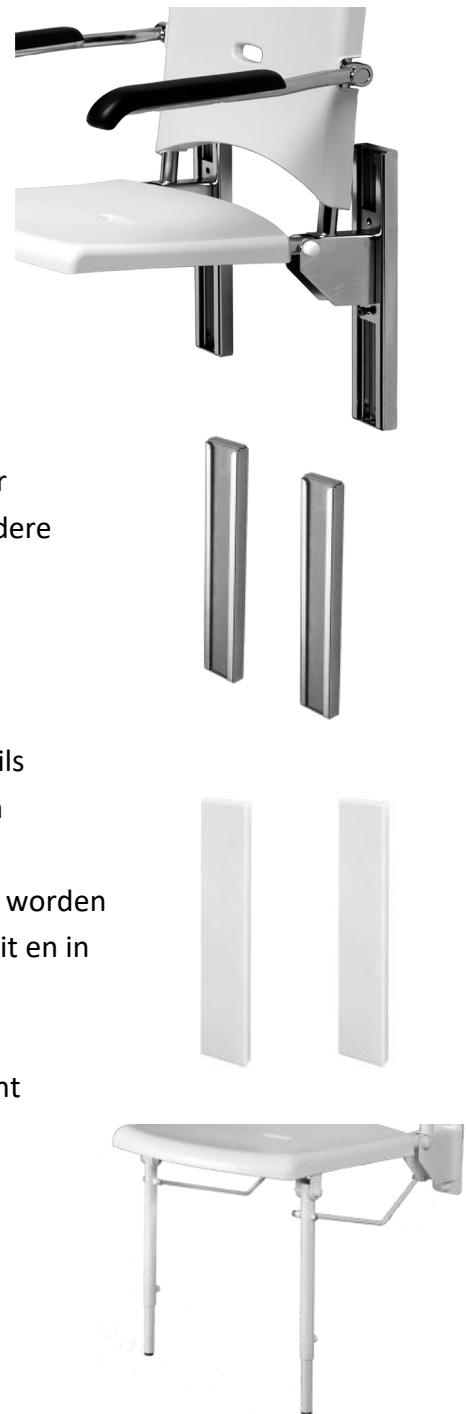

3 50 000 rail elektrisch hoog/laag douchezittingen

- leverbaar in RVS gepolijst 50 cm hoogte instelbaar
- geschikt voor alle JadaCare douchezittingen (exclusief)
- inclusief handbediening
- gebruikersgewicht tot 150 kg

Toepassing

- indien de douchezitting frequent eenvoudig en snel in hoogte instelbaar moet zijn.
- ontlast de zorgverleners



6 60 000 rail elektrisch hoog/laag wastafels

- leverbaar in RVS gepolijst 50 cm hoogte verstelbaar
- voor (rolstoel)wastafels met een hart op hart maat van 28 cm
- inclusief handbediening
- op spiegelplaat kan een spiegel (exclusief) worden aangebracht

Toepassing

- indien de wastafel frequent eenvoudig en snel in hoogte instelbaar moet zijn. Bijvoorbeeld wanneer meerdere gebruikers gebruik maken van dezelfde wastafel en deze een andere gebruikershoogte vragen



6 50 060 / 6 50 065 Rail-in systeem wastafels

- leverbaar in RVS gepolijst en wit
- geschikt voor wastafels (exclusief) met een breedte van 60 of 65 cm en een hart op hart bevestigingsmaat van 28 cm
- de wastafel is 34 cm instelbaar
- instelbaar met inbusbout of inbus kartelknop



Toepassing

- indien de wastafel eenvoudig in hoogte instelbaar moet zijn. Een indicatie wijziging of andere gebruiker kan tot een andere hoogte leiden

999107 wastafel verstelset

- leverbaar in RVS gepolijst
- voor (rolstoel)wastafels met een hart op hart maat van 28 cm
- wastafels zijn 21 cm hoogte instelbaar
- royale planchet met groef voor spiegel aan de achterzijde



Toepassing

- indien de wastafel in hoogte instelbaar moet zijn. Bijvoorbeeld bij een indicatiewijziging of een andere gebruiker

Optioneel

- tevens kan er een handdouchehouder worden aangebracht zodat de handdouche binnen handbereik is om bijvoorbeeld het haar te wassen.



Douchekraan verstelset 999103 / 999109

- respectievelijk 17 en 43 cm hoogte instelbaar
- leverbaar in RVS gepolijst
- geschikt voor diverse douchekranen (exclusief) welke op het montagebord aangebracht worden
- instelbaar met inbusbout of inbus kartelknop

Toepassing

- indien de douchekraan hoogte instelbaar moet zijn. Deze verstelset is geschikt voor een zittende en staande gebruiker. Een indicatiewijziging of andere gebruiker kan tot een andere kraan hoogte leiden.

Aandachtspunt

- de hoogte verstelling vraagt om een flexibele slangenset

